


Montageanleitung

Joystickaufsätze

Guide de montage

Embout de joystick

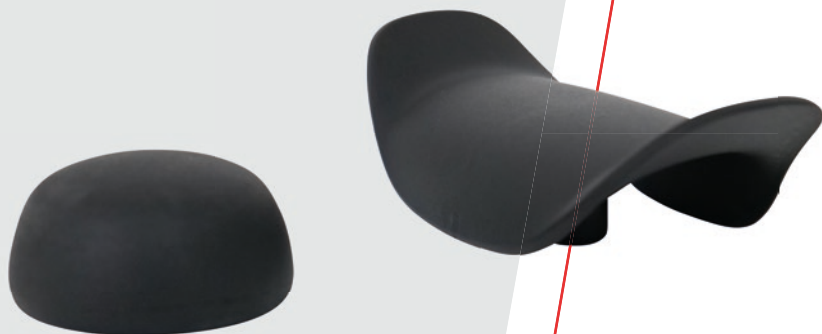

Du kannst den Aufsatz Deines Joysticks nach Deinen Wünschen anpassen. So erhältst Du einen noch höheren Komfort beim Lenken und Fahren Deines ergoflix.

Hierfür bieten wir Dir neben dem Standard-Joystickaufsatz zwei weitere Aufsätze:



Abb. 1: Joystickaufsatz Komfortknauf



Abb. 2: Joystickaufsatz Tetragabel

Gut zu wissen:

Für die Montage benötigst Du kein Werkzeug.

Und so geht's:

Greife den obersten Ring des Joysticks am Bedienmodul Deines Rollstuhls von ergoflix und ziehe diesen nach oben ab (s. Abb. 3). Nimm nun den neuen Joystickaufsatz und platziere diesen mit der Öffnung, die sich unterhalb des Aufsatzes befindet auf dem Pin des Joysticks des Bedienmoduls (s. Abb. 4). Drücke nun den neuen Aufsatz nach unten auf den Pin fest (s. Abb. 5). Prüfe zuletzt, ob der neue Aufsatz fest und richtig sitzt.



Abb. 3: Standard-Joystickaufsatz abziehen



Abb. 4: Neuen Aufsatz auf den Metallstift setzen



Abb. 5: Neuen Joystickaufsatz festdrücken

Dein neuer Joystickaufsatz für mehr Komfort beim Lenken und Fahren ist nun einsatzbereit.

Vous pouvez choisir l'embout de votre joystick, selon vos besoins. Cela vous offre encore plus de confort pour diriger et conduire votre fauteuil roulant électrique pliable ergoflix.

À cette fin, nous vous proposons deux embouts supplémentaires en plus de l'embout de joystick standard :



Fig. 1: Embout de joystick Confort



Fig. 2: Embout de joystick Tetra

Bon à savoir:

Vous n'avez besoin d'aucun outil pour le montage.

Voici les étapes pour le montage :

D'abord, saisissez la partie supérieure de l'embout standard sur le module de commande de votre fauteuil roulant ergoflix et tirez-le vers le haut (voir Fig. 3). Vous pouvez ensuite installer le nouvel embout : prenez le nouvel embout de joystick et alignez l'ouverture située en dessous avec la goupille du joystick (voir Fig. 4). Fixez maintenant le nouvel embout, en appuyant fermement le nouvel embout vers le bas sur la goupille (voir Fig. 5).

Enfin, assurez-vous que le nouvel embout est bien fixé et correctement en place.



Fig. 3 : Retrait de l'embout standard du joystick



Fig. 4 : Placement du nouvel embout sur la goupille métallique



Fig. 5 : Placement du nouvel embout sur la goupille métallique

Votre nouvel embout de joystick, conçu pour améliorer le confort lors de la direction et de la conduite, est maintenant prêt à l'emploi.

ergoflix Group GmbH
Marktstr. 20
46499 Hamminkeln
Fon 02852 9459000
Fax 02852 9459099
info@ergoflix.de
www.ergoflix.de

ergoflix France
2 Rue Marcel Dassault
69740 Genas
Tél. +33 4 51 08 92 00
info@ergoflix.fr
www.ergoflix.fr

A Sunrise Medical® Brand 

Telefonische Servicezeiten

März bis November:

montags bis freitags von 8:30 bis 18:00 Uhr

Dezember bis Februar:

montags bis freitags von 8:30 bis 17:00 Uhr

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Besuche uns auf Social Media | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Bitte beachten: Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung an ergoflix-Rollstühlen vorgesehen. Detaillierte Informationen zur Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit unseren Rollstuhlmodellen findest Du auf unserer Webseite unter www.ergoflix.de.

Remarque : cet accessoire est exclusivement destiné à être utilisé sur les fauteuils roulants ergoflix. Vous trouverez des informations détaillées sur la compatibilité des différents accessoires avec nos modèles de fauteuils roulants sur notre site Web à l'adresse www.ergoflix.fr.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Mentions légales : Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression. Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés.

Art. Nr.: A00056



202605-22